


## NOTICE D'ENTRETIEN F-336

### MICRODERMABRASION AVEC DES MICROCRISTAUX ET À TÊTES À DIAMANTS


1. Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière du panneau.
2. Allumez l'appareil en appuyant sur "POWER".
3. Appuyez sur "SELECT" pour sélectionner la fonction désirée.

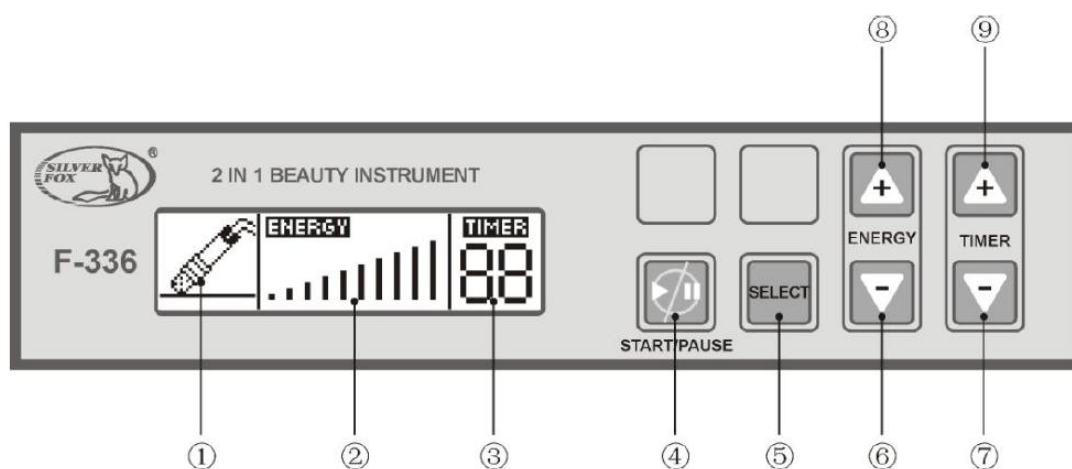

1. Écran
2. Barre d'état "ENERGY"
3. Display "TIMER"
4. Bouton "START/PAUSE"
5. Sélection de la fonction
6. Ajustage "ENERGY -"
7. Ajustage "TIMER -"
8. Ajustage "ENERGY +"
9. Ajustage "TIMER +"

## **MICRODERMABRASION PAR MICROCRISTAUX EN ALUMINIUM**


Réipients pour les microcristaux:

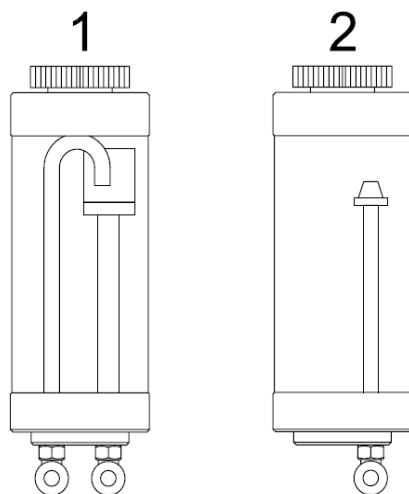


1. Réipient pour les microcristaux utilisés.
2. Réipient pour les nouveaux microcristaux.

### **MODE D'EMPLOI**

1. Montez les supports latéraux de la pièce à la main.
2. Raccordez les tuyaux d'air dans les bouteilles comme indiqué dans le croquis.  
Pour les connecter à la borne de l'appareil et aux réipients, il faut les introduire et appuyer légèrement. Pour les enlever, il faut appuyer la partie en plastique de la connexion et étirer le tuyau sans le forcer.

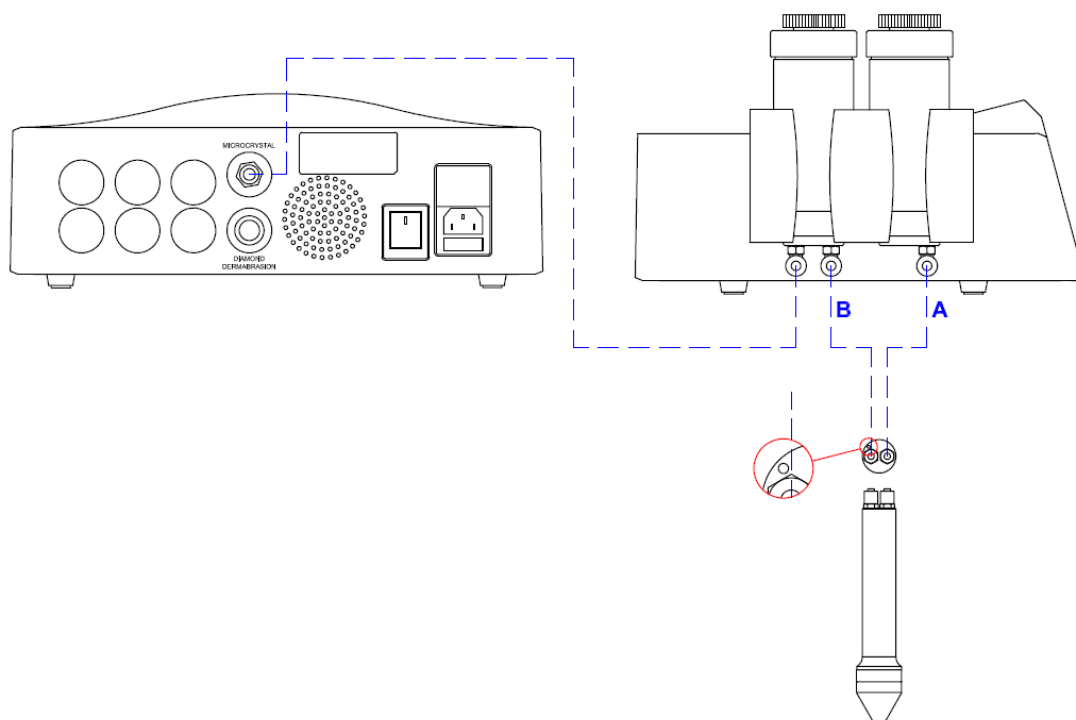

3. Ouvrez le flacon "2" et le remplissez avec des microcristaux sans dépasser la limite montrée sur le croquis.

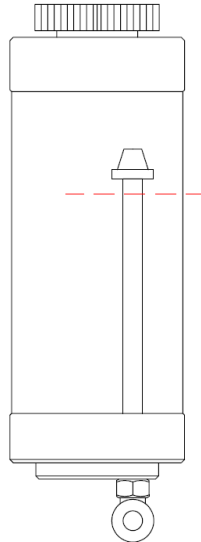

4. Bien fermer la bouteille. La zone de filetage du bouchon doit rester complètement propre. Il faudrait utiliser des microcristaux de taille de particule #120.

Note importante: ne manipulez pas les microcristaux avec les mains.

5. Ajustez les options «TIMER» et «ENERGY» selon vos souhaits.
6. Appuyez sur le bouton «START/STOP» pour commencer le traitement.
7. Une fois que le traitement est finalisé, le récipient numéro 1 sera plein de microcristaux utilisés et le récipient numéro 2 sera vide. Enlevez les microcristaux utilisés et jetez les. Remplissez le récipient numéro 2 pour les prochains traitements. La zone de filetage doit rester complètement propre.

Note importante: ne manipulez pas les microcristaux avec les mains.

## NOTES

La poignée doit être en contact avec la peau seulement de 3 à 5 secondes.

## CAUTIONS

Nettoyez la peau, séchez l'excès d'eau sur le visage et puis commencez le traitement. Il n'est pas nécessaire d'appliquer des émulsions ou lotions supplémentaires.

Pendant le traitement lorsque vous êtes proches des yeux, veuillez ajuster la pression d'air entre 1 -5, et il suffira de traverser cette zone deux fois.


Pendant le fonctionnement dans la zone T, une région qui généralement a une épaisse cuticule, vous pouvez utiliser la grosse tête pour la dermabrasion et la pression d'air peut être augmentée en conséquence.

Après les traitements, nettoyez le visage à nouveau avec de l'eau et appliquez ensuite le traitement nutritionnel souhaité.

## **MICRODERMABRASION PAR TÊTES À DIAMANT**

### **MODE D'EMPLOI**

1. Branchez les accessoires correctement à l'arrière du panneau.
2. Branchez l'autre extrémité du tuyau au manche aspirateur.
3. Placez la tête à diamant adaptée dans le manche. Il existe neuf types de têtes à diamant.
4. Vérifiez que le filtre en mousse soit bien placé dans le manche.
5. Vérifiez que le filtre en métal soit bien placé dans le manche.

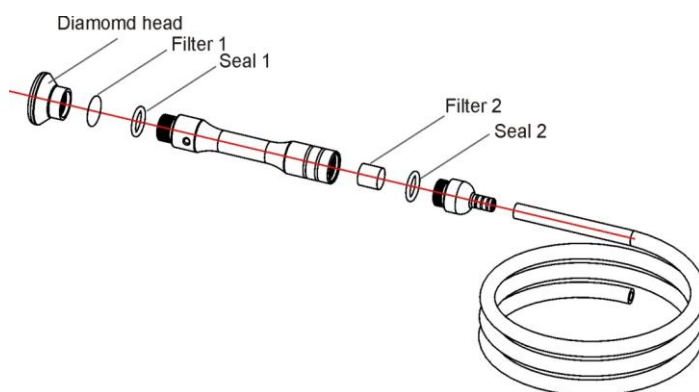

6. Vous pouvez ajuster l'effet d'aspiration en réglant le régulateur.
7. Vous pouvez ajuster l'effet d'aspiration en couvrant ou découvrant le trou sur le côté du manche avec votre doigt.
8. Appuyez sur le bouton «START/STOP» pour commencer le traitement.

### **CAUTIONS**

- Ne laissez pas le manche aspirateur au même endroit sur la peau trop longtemps car cela peut provoquer des blessures.
- Évitez d'utiliser l'appareil sur une peau irritée.
- Les zones suivantes ne sont pas appropriées pour ce type de traitements : tumeurs de la peau, grains de beauté, marques de naissance, angiomes, lèvres, yeux, herpès et verrues.
- Le régulateur de pression peut être complètement dévissé. Si cela arrive par accident, vous pouvez le revisser et l'appareil fonctionnera de nouveau correctement.


- Ne faites pas fonctionner la pompe à vide pendant de longues périodes sans l'avoir laissée refroidir un moment entre chaque traitement afin d'empêcher une surchauffe de la pompe qui pourrait provoquer un dommage sur l'appareil. Les dommages provoqués par une surchauffe de la pompe ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

## FAQ

### Microdermabrasion par microcristaux en aluminium

Si la pompe fait un bruit inhabituel:

- Enlever les 4 vis de fixation de la pompe en dessous de l'appareil. Ces vis ont pour fonction de maintenir la pompe pendant le transport pour éviter que celle-ci puisse s'abîmer. Il peut arriver que, pendant le fonctionnement, ces vis empêchent la vibration correcte de la pompe et pour cette raison, cela augmente le niveau de bruit.

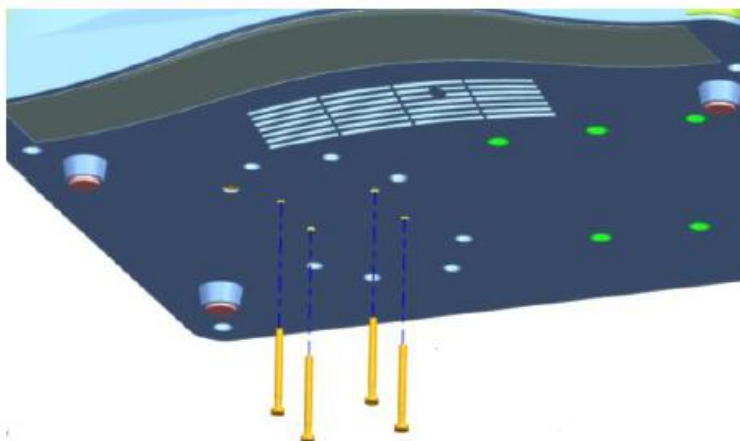

## MAINTENANCE

### Microdermabrasion par microcristaux en aluminium

- Ne pas utiliser l'appareil si le tuyau filtrant relié à l'appareil n'est pas installé.  
Ce filtre doit être remplacé pour chacun des 5 traitements.
- Pour remplacer le filtre:
  - Dévissez le bouchon du réservoir.
  - Retirez le filtre en tirant et insérer le nouveau.
  - Vissez la partie supérieure du réservoir, en s'assurant que le joint en silicone soit correctement placé.

Remarque: Avant de visser le haut, essuyez toute trace de microcristaux dans le filetage et le joint en silicone afin de garantir leur étanchéité.

4 filtres de remplacement sont fournis.

- Après le traitement, s'il vous plaît utilisez de l'eau distillée et une brosse pour nettoyer les accessoires. Puis trempez-les complètement dans le récipient pour désinfecter avec une solution d'alcool 75% pendant 15 minutes. Puis les retirer, les nettoyer et puis les mettre dans le stérilisateur UV pour être prêts pour la prochaine utilisation.

#### Microdermabrasion par têtes à diamant

- Le filtre en mousse dans le manche doit être changé pour chacun des 5 traitements. Démontez le manche et remplacez le filtre. Puis réassemblez le manche.
- Le filtre en métal dans le manche doit être changé après chacun des 5 traitements. Démontez le manche et remplacez le filtre. Puis réassemblez le manche.
- Nettoyez et stérilisez les têtes à diamant après chaque traitement.